

Instruções de uso

As seguintes instruções devem ser usadas em conjunto com as informações detalhadas na embalagem.

Breve descrição do produto	
Luvas de proteção de nitrilo, sem pó, descartáveis não estéreis. Nome do produto “MERCATOR gogrip”	
Descrição completa do produto	
Matéria-prima	: nitrilo
Superfície externa	: textura diamante
Superfície interna	: polimerizada + clorada
Punho	: uniformemente enrolado
Cor	: preto
Formato	: ambidestro, adequado para a mão direita e esquerda
Tamanhos	: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11)
AQL	: 1,5
Quantidade em uma única embalagem	: 50 peças cf. peso
Período de validade	: 3 anos (da data de fabricação)
Recomendações sobre o armazenamento	

Recomenda-se guardar as luvas em local seco, sob temperatura de 5 a 35°C e protegê-las da luz solar e fluorescente.
Manter as luvas a uma distância não inferior a 1 m de dispositivos de aquecimento, fontes de fogo e ozônio.
Não armazenar próximo a solventes, óleos, combustíveis e lubrificantes.

Contacto alimentar	
As luvas são marcadas com o pictograma de contato com  alimentos e atenderão às condições do Regulamento da Comissão (UE) nº 10/2011, Regulamento (CE) nº 1935/2004 e Regulamento da Comissão nº 2023/2006 sobre Boas Práticas de Fabricação. As luvas são adequadas para uso com qualquer tipo de alimento e foram testadas para Migração Global de acordo com DM 21/03/1973:	
Líquido simulador alimentar (testado por 2h a 40°C)	Resultados (Limite 8mg/dm²)
3% ácido acético	Cumpre
10% etanol	Cumpre
Azeite	Cumpre
Classificação EPI e conformidade com as normas	

Luvas classificadas como Equipamentos de Proteção Individual – categoria III de acordo com o Anexo II do Regulamento 2016/425 e cumprem com as seguintes normas:
EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+ A1:2018 (Tipo B), EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.

Certificado de teste tipo UE emitido por: SATRA (Organismo Notificado Número 2777)
Certificados de teste tipo UKCA emitidos por: SATRA (Organismo Notificado Número 0321)

Controle de EPIs fabricados:	Reino Unido
CE 2777	CA 0321
SATRA Technology Europe Limited.	SATRA Technology Centre
Bracetown Business Park.	Limited.
Clonee.	Wyndham Way, Telford Way,
D15YN2P.	Kettering, Northamptonshire,
Irlanda.	NN16 8SD,
	Grã-Bretanha.

Declaração de conformidade e instruções de uso junto com informações sobre o importador disponível em: www.mercatormedical.eu

Condições de uso	
Antes de calçar as luvas, recomenda-se secar bem a pele das mãos. Antes de usar as luvas, verificar se há defeitos. Luvas descartáveis. Ter cuidado para não deixar produtos químicos entrarem nas luvas através do punho. Se uma substância química entrar em contato com a pele, lavá-la imediatamente com bastante água e sabão. Durante o uso, se houver furos, rachaduras ou rasgos, substituir as luvas imediatamente. Evitar luvas que estejam sujas por dentro: elas podem causar irritação, levando a dermatites ou lesões mais graves. Luvas não devem ser usadas em contato com fogo aberto e para proteção contra ferramentas pontiagudas. As luvas não se destinam a soldagem, proteção contra descargas elétricas, radiação ionizante ou objetos frios ou quentes.	
Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a distinção entre misturas e produtos químicos puros.	
Os níveis de degradação indicam uma alteração na resistência à perfuração da luva após a exposição a um produto químico agressivo. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório em amostras retiradas apenas da palma da mão (exceto quando o comprimento da luva for igual ou superior a 400 mm, onde o punho também é testado) e aplica-se apenas ao produto químico testado. A resistência química pode variar se o produto químico for usado em uma mistura.	
A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e aplica-se apenas à amostra de teste. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições do local de trabalho podem diferir das condições de teste devido à temperatura, abrasão e degradação.	
Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, arranhões, fricção, degradação devido ao contato químico etc. podem reduzir significativamente a vida útil real. Com produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado ao selecionar luvas resistentes a produtos químicos.	
As luvas são adequadas para fins especiais, pois são luvas de proteção onde o risco de lesão no pulso é considerado mínimo, as luvas são mais curtas que EN ISO 21420 – requisito mínimo de comprimento.	
Componentes/componentes perigosos	

Algumas luvas podem conter componentes que causam alergia em pessoas alérgicas a elas, que podem desenvolver irritação de contato e/ou reações alérgicas. Se ocorrer uma reação alérgica, procurar imediatamente atendimento médico .

Utilização	
Luvas usadas podem estar contaminadas com substâncias infecciosas ou outras substâncias perigosas. Elimine-os de acordo com os regulamentos locais aplicáveis. O enterramento ou incineração de luvas deve ser realizado sob condições controladas.	
Aplicação	
Luvas de proteção não estéreis com paredes mais grossas e textura diamante para perfeita aderência e proteção ao trabalhar em ambientes gordurosos e húmidos. Destina-se ao uso em locais onde há necessidade de proteção contra substâncias perigosas e agentes infecciosos. São luvas resistentes a substâncias químicas classificadas como Equipamento de Proteção Individual de Categoria III. O desenho e a marcação das luvas cumprem os requisitos do Regulamento 2016/425 sobre Equipamentos de Proteção Individual e incluem o Regulamento EPI (UE) 2016/425 introduzido na legislação britânica (categoria III). As luvas devem ser usadas apenas para o fim a que se destinam.	
Fabricante	
MERCATOR MEDICAL (Thailand) Ltd. 88/8 Moo 12 Tambon Kampaengphet, Amphur Rattaphum, Songkhla 90180, Tailândia. www.mercator.co.th	
Importador / Representante Autorizado	

Mercator Medical S.A.
Adres: Rua H. Modrzejewskiej 30
31-327 Cracóvia, Polónia
www.mercatormedical.eu

Níveis de resistência à permeação de acordo com EN ISO 374-1:2016+A1:2018		EN ISO 374-4:2019 Degradação [%]
Nível 1 >10 min, Nível 2 >30 min, Nível 3 >60 min, Nível 4 >120 min, Nível 5 >240 min, Nível 6 >480 min		
Resultados dos testes de acordo com EN 16523-1:2015+A1:2018		
Substância química	Nível	
n-Heptano (I)	4	36,8
40% Hidróxido de sódio (K)	6	-8,1
30% Peróxido de hidrogênio (P)	3	31,9
37% Formaldeído (T)	4	14,8

Atenção: 1) Comprimento mínimo das luvas para uso laboratorial de acordo com EN455-2
2) EN ISO 374-4: 2019 Os resultados da degradação indicam uma alteração na resistência à perfuração da luva após a exposição a um produto químico agressivo

Atenção: 1) Comprimento mínimo das luvas para uso laboratorial de acordo com EN455-2
2) EN ISO 374-4: 2019 Os resultados da degradação indicam uma alteração na resistência à perfuração da luva após a exposição a um produto químico agressivo


Testes de acordo com EN ISO 374-2:2019 (ISO 2859)		Testes de acordo com EN ISO 374-5:2016	
Nível de desempenho	AQL	Proteção contra bactérias e fungos	Cumpre
Nível 3	<0,65	Proteção contra vírus	Cumpre
Nível 2	<1,5		
Nível 1	< 4,0		

Pictogramas e símbolos utilizados na embalagem			
	Produto descartável		Produto não esterilizado
	Informações adicionais no interior da embalagem		Manter longe da luz solar e fluorescente
	A qualidade das luvas não é garantida se a embalagem estiver danificada		Limite de temperatura/armazene em temperatura entre 5 e 35°C
	Proteger da humidade, armazenar em local seco		Luvas de proteção contra substâncias químicas perigosas marcadas com código de letras
	Proteção contra bactérias, fungos e vírus		Data de fabricação
	Fabricante (o símbolo deve ser acompanhado do nome e endereço do fabricante)		Símbolo de contato com alimentos (pode ser usado em contato com alimentos, mais detalhes nas instruções)
	Data de validade		Conformidade com os regulamentos do mercado russo
	Consulte a instrução de uso		Número de referência

	Luvas sem pó
	Manter longe do ozônio
	50 luvas cf. peso
	Embalagem de papel qualifica-se para reciclagem
	As embalagens podem ser tratadas como lixo doméstico

	Código do lote
	Conformidade com os regulamentos do mercado ucraniano

COMO COLOCAR AS LUVAS

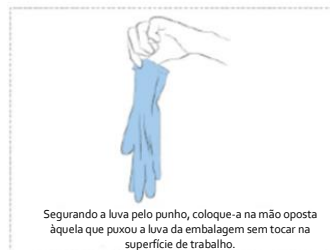

COMO RETIRAR AS LUVAS?

