

Instruções de uso

As seguintes instruções devem ser usadas em conjunto com as informações detalhadas na embalagem.

Breve descrição do produto	
Luvas de proteção de nitrilo, sem pó, descartáveis não estéreis.	
Descrição completa do produto	
Nome do produto	: MERCATOR gogrip long
número de referência	: RP30031002_0001, RP30031003_0001, RP30031004_0001, RP30031005_0001, RP30031006_0001
Matéria-prima	: nitrilo
Superfície externa	: textura diamante
Superfície interna	: polimerizada + clorada
Punho	: uniformemente enrolado
Cor	: lazul
Formato	: ambidestro, adequado para a mão direita e esquerda
Tamanhos	: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10), XXL (10-11)
AQL	: 1,5
Quantidade em uma única embalagem	: 50 peças cf. peso
Período de validade	: 3 anos (da data de fabricação)
Recomendações sobre o armazenamento	

Recomenda-se guardar as luvas em local seco, sob temperatura de 5 a 35°C e protegê-las da luz solar e fluorescente.
Manter as luvas a uma distância não inferior a 1 m de dispositivos de aquecimento, fontes de fogo e ozônio. Não armazenar próximo a solventes, óleos, combustíveis e lubrificantes.

Contacto alimentar	
As luvas são marcadas com o pictograma de contato com alimentos e atenderão às condições do Regulamento da Comissão (UE) nº 10/2011, Regulamento da Comissão nº 2023/2006 sobre Boas Práticas de Fabricação.	
Líquido simulador alimentar (testado por 2h a 40°C)	Resultados (Limite 8mg/dm²)
3% ácido acético	Cumpre
10% etanol	Cumpre
Azeite	Cumpre

Pode-se garantir que nenhuma substância seja transferida para os alimentos que possa levar a uma alteração dos alimentos. Luvas descartáveis para alimentos são projetados para uso de curto prazo e mudanças frequentes. É melhor trocar as luvas regularmente.

Classificação EPI e conformidade com as normas

Luvas classificadas como Equipamentos de Proteção Individual – categoria III de acordo com o Anexo II do Regulamento 2016/425 e cumprem com as seguintes normas:
EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1:2016+ A1:2018 (Tipo B), EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016.
Certificado de teste tipo UE emitido por: SATRA (Organismo Notificado Número 2777)
Controle de EPIs fabricados:
CE 2777
SATRA Technology Europe Limited.
Bracetown Business Park.
Clonee.
D15YN2P.
Irlanda.
Declaração de conformidade e instruções de uso junto com informações sobre o importador disponível em: www.mercatormedical.eu

Condições de uso

Antes de calçar as luvas, recomenda-se secar bem a pele das mãos. Antes de usar as luvas, verificar se há defeitos. Luvas descartáveis. Ter cuidado para não deixar produtos químicos entrarem nas luvas através do punho. Se uma substância química entrar em contato com a pele, lavá-la imediatamente com bastante água e sabão. Durante o uso, se houver furos, rachaduras ou rasgos, substituir as luvas imediatamente. Evitar luvas que estejam sujas por dentro: elas podem causar irritação, levando a dermatites ou lesões mais graves. Luvas não devem ser usadas em contato com fogo aberto e para proteção contra ferramentas pontiagudas. As luvas não se destinam a soldagem, proteção contra descargas elétricas, radiação ionizante ou objetos frios ou quentes.
Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a distinção entre misturas e produtos químicos puros.
Os níveis de degradação indicam uma alteração na resistência à perfuração da luva após a exposição a um produto químico agressivo. A resistência química foi avaliada em condições de laboratório em amostras retiradas apenas da palma da mão (exceto quando o comprimento da luva for igual ou superior a 400 mm, onde o punho também é testado) e aplica-se apenas ao produto químico testado. A resistência química pode variar se o produto químico for usado em uma mistura.
A resistência à perfuração foi avaliada em condições de laboratório e aplica-se apenas à amostra de teste. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, pois as condições do local de trabalho podem diferir das condições de teste devido à temperatura, abrasão e degradação.
Quando usadas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, arranhões, fricção, degradação devido ao contato químico etc. podem reduzir significativamente a vida útil real. Com produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado ao selecionar luvas resistentes a produtos químicos.
As luvas são adequadas para fins especiais, pois são luvas de proteção onde o risco de lesão no pulso é considerado mínimo, as luvas são mais curtas que EN ISO 21420 – requisito mínimo de comprimento.

Componentes/componentes perigosos

Os componentes utilizados na fabricação de luvas podem causar reações alérgicas em algumas pessoas. Algumas luvas podem conter componentes conhecidos por serem uma possível causa de alergia para pessoas alérgicas a eles, que podem desenvolver irritação de contato e/ou reação alérgica. Em caso de alergia reação consulte um médico


Utilização
Elimine-os de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.
Aplicação
Luvas de proteção não estéreis com paredes mais grossas e textura diamante para perfeita aderência e proteção ao trabalhar em ambientes gordurosos e húmidos. Destina-se ao uso em locais onde há necessidade de proteção contra substâncias perigosas e agentes infecciosos.
Fabricante
MERCATOR MEDICAL (Thailand) Ltd. 88/8 Moo 12 Tambon Kampaengphet, Amphur Rattaphum, Songkhla 90180, Tailândia. www.mercator.co.th
Importador / Representante Autorizado
Mercator Medical S.A. Adres: Rua H. Modrzewskiej 30 31-327 Cracóvia, Polónia www.mercatormedical.eu

Níveis de resistência à permeação de acordo com EN ISO 374-1:2016+A1:2018		EN ISO 374-4:2019 Degradação [%]
Nível 1 >10 min, Nível 2 >30 min, Nível 3 >60 min, Nível 4 >120 min, Nível 5 >240 min, Nível 6 >480 min		
Resultados dos testes de acordo com EN 16523-1:2015+A1:2018		
Substância química	Nível	
n-Heptano (I)	4	36,8
40% Hidróxido de sódio (K)	6	-8,1
30% Peróxido de hidrogénio (P)	3	31,9
37% Formaldeído (T)	4	14,8


Atenção: 1) Comprimento mínimo das luvas para uso laboratorial de acordo com EN455-2
2) EN ISO 374-4: 2019 Os resultados da degradação indicam uma alteração na resistência à perfuração da luva após a exposição a um produto químico agressivo

Testes de acordo com EN ISO 374-2:2019 (ISO 2859)		Testes de acordo com EN ISO 374-5:2016	
Nível de desempenho	AQL	Proteção contra bactérias e fungos	Cumpre
Nível 3	<0,65	Proteção contra vírus	Cumpre
Nível 2	<1,5		
Nível 1	< 4,0		

Como colocar as luvas

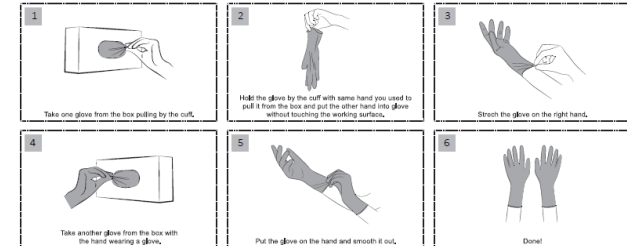

Como tirar as luvas

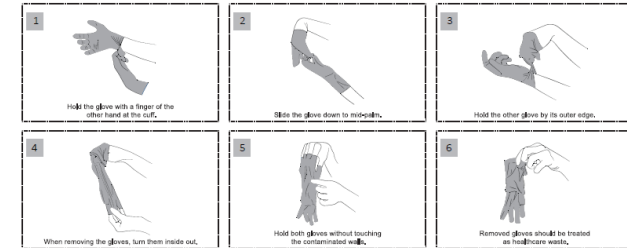

Pictogramas e símbolos utilizados na embalagem

PPE	Personal Protective Equipment	NITRILE	Nitrile Gloves		Powder-free gloves
	For single use only		Non-sterile		Product quality is not ensured if the package is damaged
	Keep away from sunlight		Keep dry		Temperature limitation 5-35°C
	Keep away from ozone		EN ISO 374-1 chemical protection gloves; accompanied by a 3-digit code referring to three		EN ISO 374-5 Glove protecting against bacteria, fungi and viruses
	Consult instructions for use	REF	Catalogue number	LOT	Lot / batch number
#	Model number		Date of manufacture		Expiry date
	Manufacturer	EC REP	Authorized representative in the European Union		Importer
CE 2777	CE Mark, PPE		Suitable for food contact (for details check the intended use)		Recyclable packaging
	Package can be treated as municipal waste		Indicates compliance with the requirements of Ukrainian market		Additional information on inner side of package